

ขั้นตอนการใช้เครื่องนึ่งไอน้ำในการทำให้อุปกรณ์ปราศจากเชื้อ



งานจ่ายกลาง
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 5

1. เปิดเครื่องเตรียม warm ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง





2. นำห่ออุปกรณ์เข้าเครื่อง โดยเรียงอุปกรณ์สลับให้อิอน้ำเข้าได้ทั่วถึง





3. ปิดประตูหมุนปล่อยอากาศออกจากห้องหนึ่ง เพื่อให้เป็นสุญญากาศ แล้วกด ON เพื่อเริ่มต้นการทำงาน



4. เครื่องจะดำเนินการตามขั้นตอนโดยใช้เวลา 1 ชั่วโมง

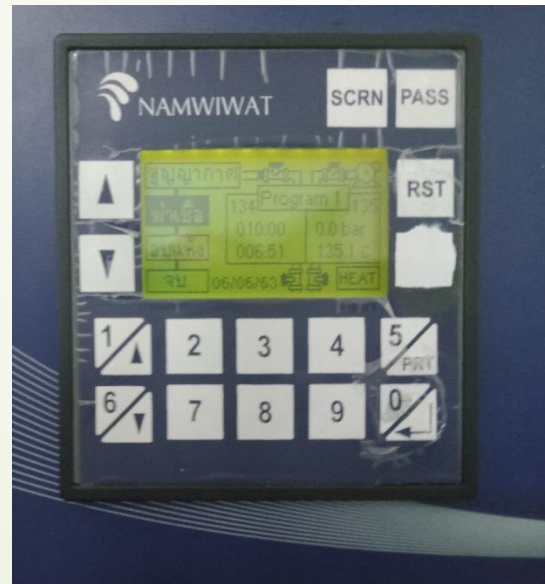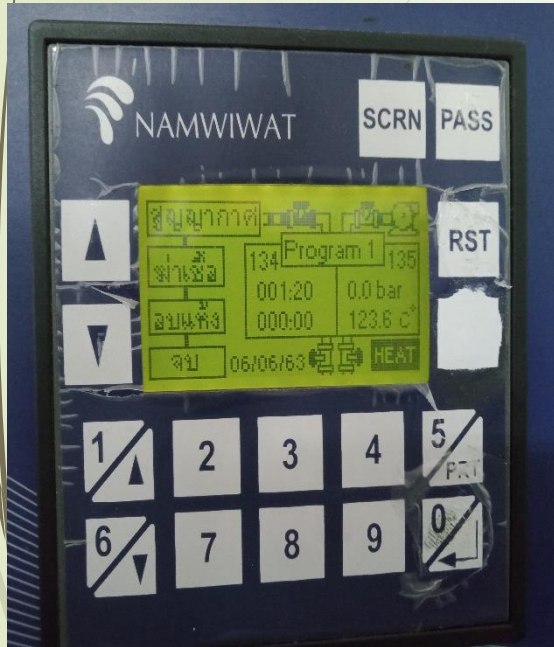


5. หมุนปล่อยอากาศเข้าห้องนึ่ง รอให้อุณหภูมิลดลง เปิดประตูเครื่องนึ่ง

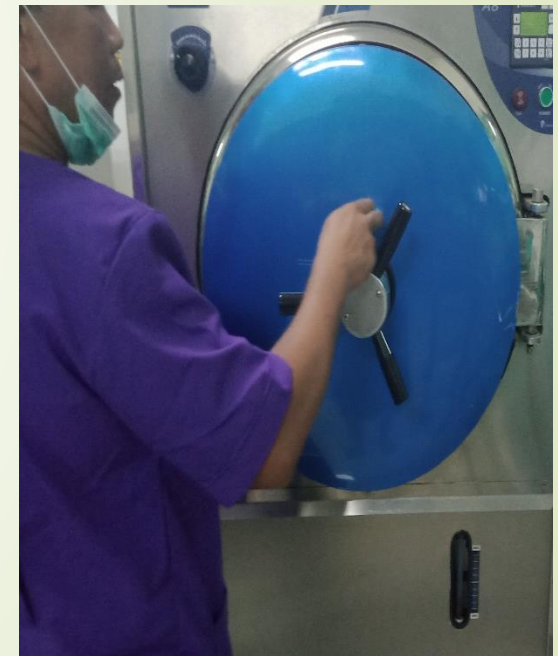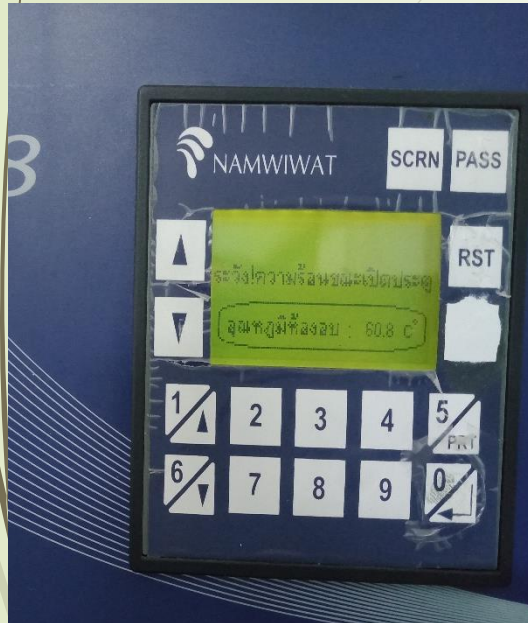



6. นำเครื่องมือออกจากเครื่อง ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง เพื่อระบายอากาศ



7. ตรวจสอบประสิทธิภาพของการนั่ง ถ้ามีประสิทธิภาพ แถบสติ๊กเกอร์จะปรากฏแถบสี

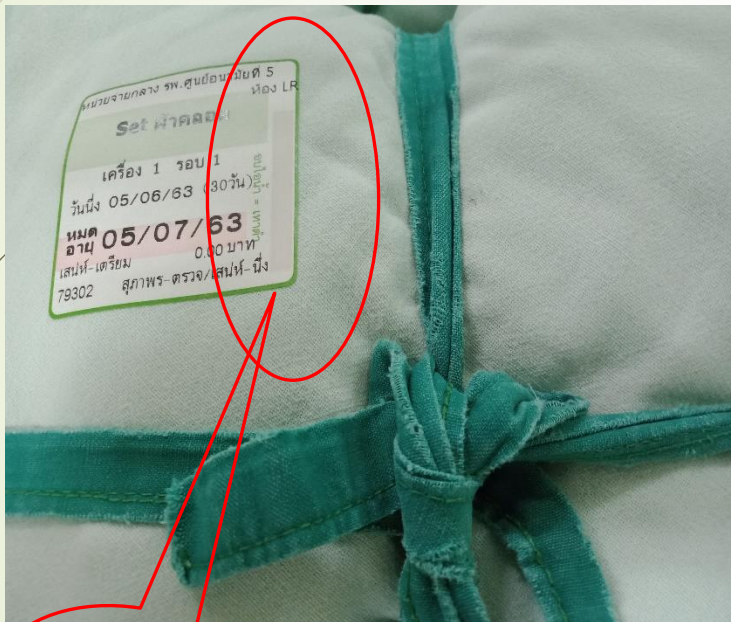

ยังไม่ได้นั่ง

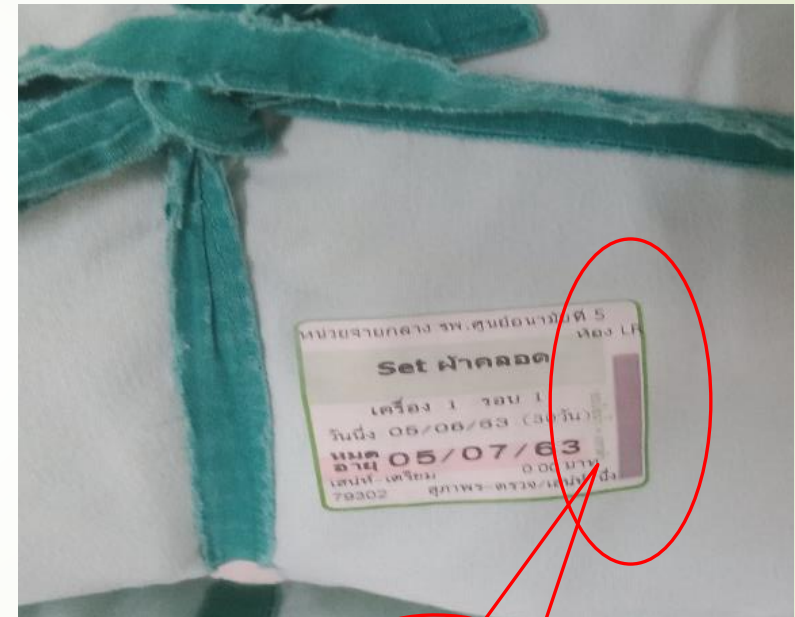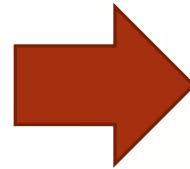

การนั่งได้มาตรฐาน

8. จัดเรียงอุปกรณ์ที่นึ่งแล้วไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิ 18 -22 องศาเซลเซียส
และความชื้นสัมพัทธ์ 35 -70 %



9. จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ตามหน่วยงาน โดยรถที่ได้มาตรฐาน

