


ขั้นตอนการฆ่าเชื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ ด้วยการอบแก๊สเอทิลีน (EO)

งานจ่ายกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศอ.5

1. Pack เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ ใส่ซอง โดยเลือกซองตามขนาดเครื่องมือและอุปกรณ์ และใส่ comply E.O. Indicator โดยต้องให้มีเนื้อที่เหลือ อุปกรณ์ที่จะเข้าอบแก๊ส ต้องแน่ใจว่าไม่เปียก

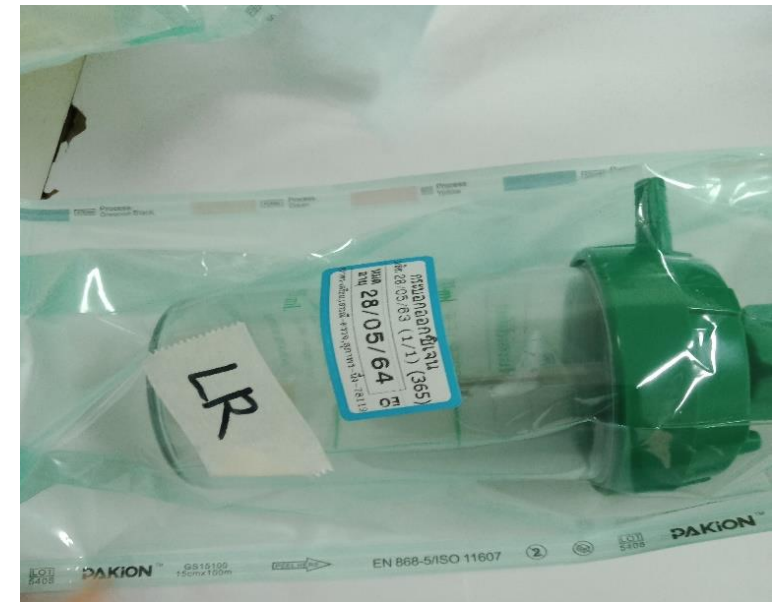


2. ติดป้ายชื่อ Set วันอบ และวันหมดอายุ

จัดเรียงอุปกรณ์และเครื่องมือลงตะแกรง เตรียมเข้าเครื่องอบ EO

โดยใส่ Attest B.I.ระบบ E.O. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ

Attest B.I.
ระบบ **E.O.**

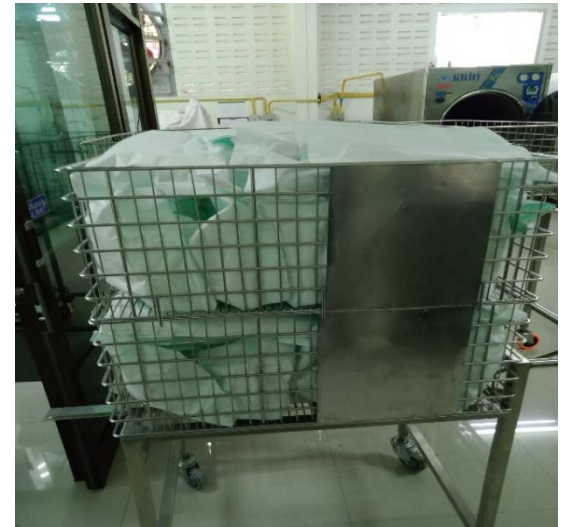

3. สวมถุงมือและหน้ากาก ก่อนและหลังนำของเข้าหรือออกจากห้องนิ่ง และเช็ดทำความสะอาดผนังห้องนิ่งทุกครั้งก่อนการใช้งาน




4. เปิดสวิตช์ระบายลมที่ต่อต้านหลังอาคาร เปิดเบรกเกอร์ตัวเครื่องขึ้น ทำการ warm จนได้อุณหภูมิ 150 องศา




5. เมื่ออุณหภูมิได้ 150 องศา ใส่กระป๋องแก๊สและอุปกรณ์เข้าไปในเข้าในตัวเครื่อง

อุณหภูมิ
150 องศา

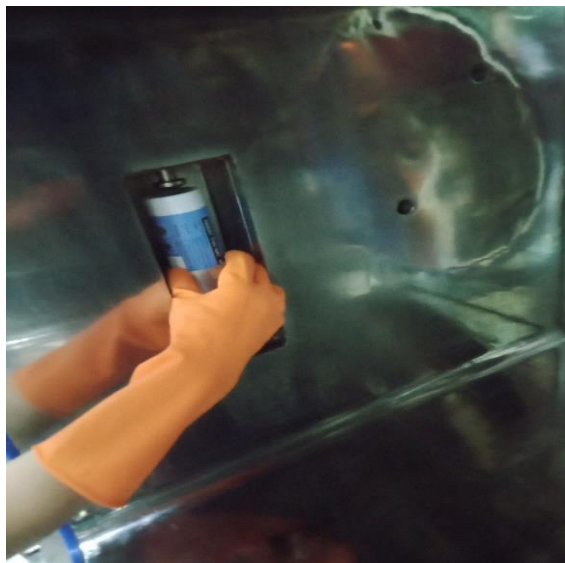

6. ปิดฝาตรวจสอบความเรียบร้อย รอจนกระทั่งหน้าจอขึ้น “ READY TO START ”
กด START ที่หน้าจอ เครื่องจะเริ่มทำงาน

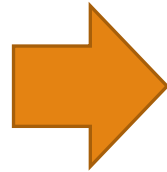

7. อบเครื่องมือนาน 12 ชั่วโมง ทำการ Reset เครื่อง เปิดปุ่มระบายแก๊สจนหมด
โดยใช้เวลา 6 ชั่วโมง เปิดเครื่องนำเครื่องมือออก



8. ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือ โดยช่องที่ผ่านการอบแก๊ส จะมีการเปลี่ยนสี



9. จัดส่งของตามจุดบริการต่างๆ

